

Panasonic

持込修理

上腕血圧計保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EW-BU70		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お 客 様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電 話 (_____) _____		
販 売 店	住所・販売店名 _____		
	電話 ((_____)) _____		

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749-26-7890

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

Panasonic®


取扱説明書

品番

上腕血圧計 EW-BU70

医療機器認証番号
EW-BU70 220AHBZX00022000

EMC
適合

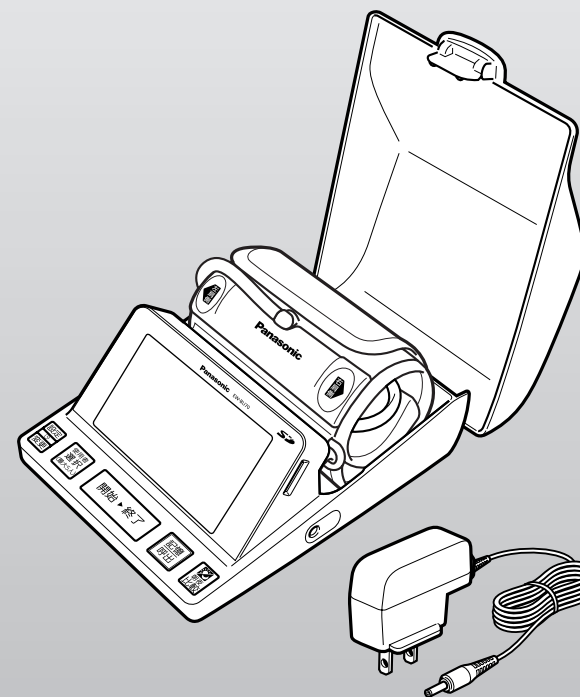

もくじ

安全上のご注意 **2**

各部のなまえ **4**

準備 **6**

- 本体を乾電池で使用する場合...6
- 本体をACアダプターで使用する場合...7
- 日付・時刻を設定する...8・9
- SDメモリーカードを準備する...10・11
- カフを巻く...12

使い方 **13**

- 測定姿勢をとる...13
- 測定の仕方...14・15
- 測定値を記憶する...16
- 記憶した測定値を呼び出す...17
- 記憶させる人数を変更する...18
- 各サインについて...19・20
- 朝と夜の平均血圧の比較をする...21
- 血圧計の記憶をSDメモリーカードへ記憶させる...22
- SDメモリーカードのフォーマット...23
- お知らせ音の時間を設定(確認)する...24
- 使い終わったら...25

お知らせ **26**

- 定格・仕様...26
- 定格表示記号の説明...26
- Q&A...27・28
- 故障を防ぐために...28
- こんな異常を感じたら...29
- 保証とアフターサービス...30
- 保証書...裏表紙



お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。



1

保管用

保証書付き

W9030BU701 A0109-0
Printed in China

安全上のご注意 (必ずお守りください)


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならぬ内容です。

 警告	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> 腕部に重度の血行障害のある人は、必ず医師と相談のうえ使用する。守らないと体調不良をおこすおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。守らないと感電や発火のおそれがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人やお子様には使わせない。 カテーテルを入れた腕で使用しない。事故やけがのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードは乳幼児の手の届くところに置かない。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> 本体やACアダプターに水などをこぼさない。感電やショート、故障の原因になります。 ACアダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。感電やショートの原因になります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> 絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。

注意


 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプターは必ず専用品(付属品)を使用する。 動かない場合や異常を感じたときは、使用を中止し、すぐにACアダプターを抜いて点検修理を依頼する。守らないと事故や感電、発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプターは確実に最後まで差し込む。守らないと感電やショートのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> 使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く。守らないとホコリや湿気で絶縁劣化になり漏電火災の原因になるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプターを抜くときはコードを持たず、必ずACアダプター本体を持って引き抜く。守らないと感電やショート、発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプターで使用する場合は、必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)(海外でのご使用や変圧器を用いたご使用はできません。) 守らないと火災や感電の原因になるおそれがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 必ず血圧測定の目的のみで使用する。守らないと故障や事故の原因になるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> 測定結果の自己判断による薬剤の服用などの治療は絶対しない。体調不良をおこすおそれがあります。必ず医師の指導、指示にしたがってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプターにピンやゴミを付着させない。感電やショート、発火のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプターを破損させるようなこと(以下の行為)はしない。(傷つける。破損させる。加工する。無理に曲げる。引張る。ねじる。重いものをのせる。挟み込む。) ACアダプターのコードを本体、ACアダプターに巻付けない。火災や感電のおそれがあります。 ACアダプターを踏まない。事故やけがのおそれがあります。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

各部のなまえ

商品をご確認ください

▶ 本体

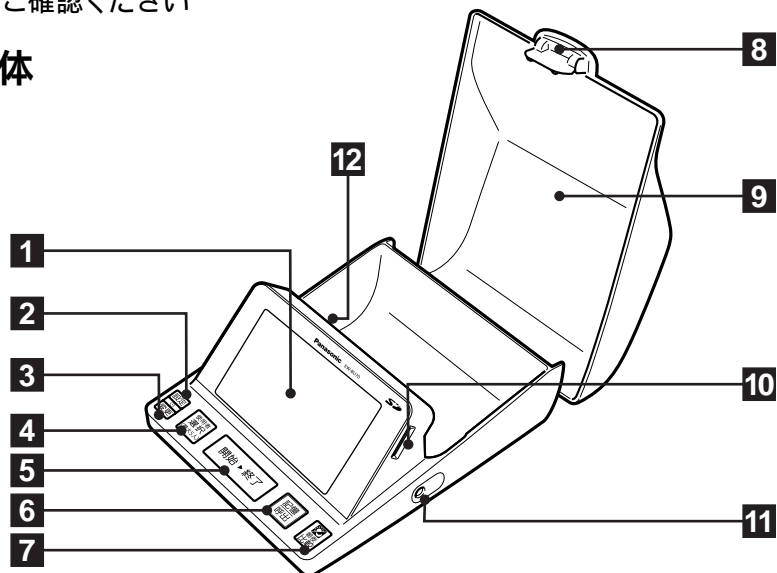

1 表示部

2 設定ボタン

3 変更ボタン

4 使用者選択ボタン
(使用者変更ボタン)

5 開始 ▶ 終了ボタン

6 記憶呼出ボタン

7 朝夜比較ボタン

8 カバー開閉ツマミ

9 カバー

10 SDメモリーカード
スロット


11 コネクタ
(ACアダプター用)

12 圧迫帯(カフ)差込口

本体カフ収納部


12

圧迫帯(カフ)
差込口

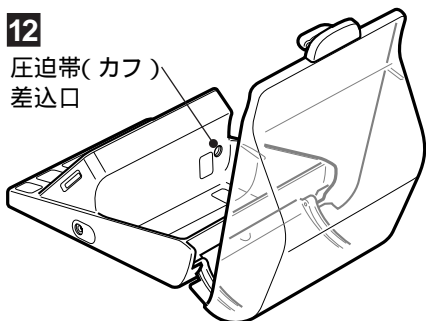


本体底面


電池カバー

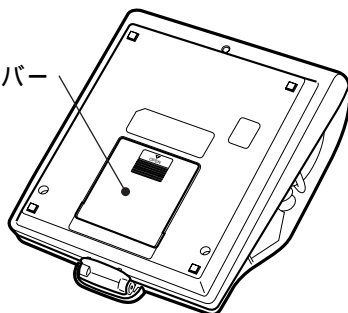


▶ 圧迫帯(カフ)

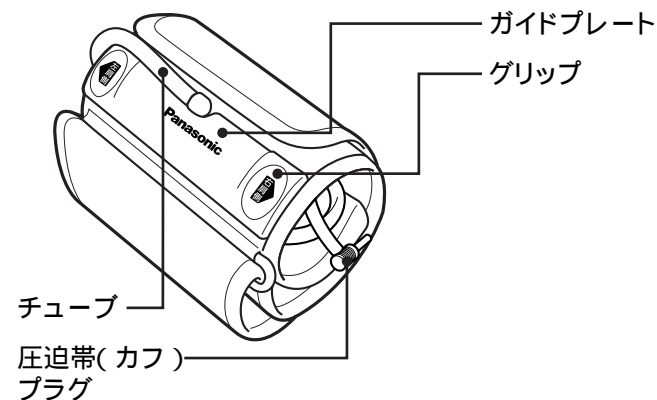

ACアダプター(EW-2B01)
(付属品)

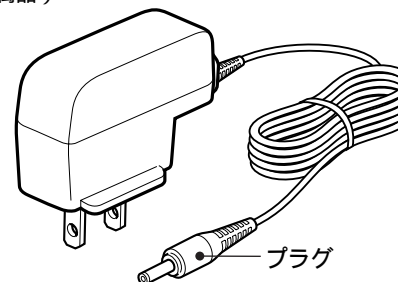

SDメモリーカード(128MB)
(付属品)

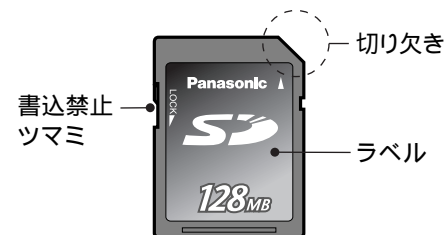

書き込み可能

書き込み禁止



書き込み禁止ツマミを「LOCK」側にしておくとSDメモリーカードへのデータの書き込みや消去および初期化ができなくなります。戻すと書き込みが出来ます。

本体や使用済みの乾電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。


製品および部品の仕様は予告なく変更する場合があります。

本体を乾電池で使用する場合

乾電池は、付属していません。販売店でお買い求めください。


必ずアルカリ乾電池をお使いください。(単3形アルカリ乾電池 LR6×4本)

●本体の乾電池交換は必ず同じメーカーの新しいアルカリ乾電池を4本同時に行ってください。

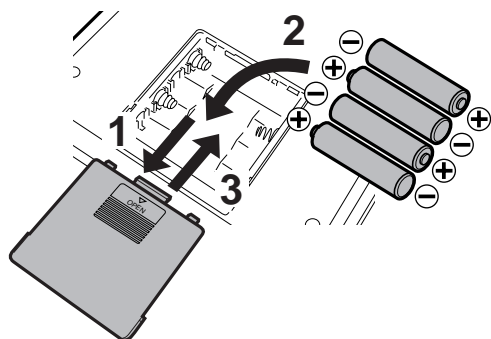

- 1 本体を裏返し、電池カバーの 1 の所を軽く押しながら矢印の方向に開く
- 2 乾電池の $\oplus\ominus$ を確認し入れる
- 3 電池カバーをスライドさせながら閉める

乾電池の取り替えは

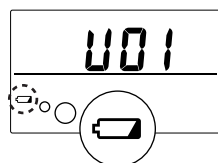

- 動作中、表示部に左図のような表示が出たとき。
- 開始▶終了ボタンを押しても表示しないとき。

乾電池について

- 乾電池での使用回数はパナソニックアルカリ乾電池(単3形乾電池LR6)で室温23℃、170mmHg加圧、上腕周長30cm、1日3回使用された場合で約500回使えます。
 - 室温が低いときや、アルカリ乾電池以外の乾電池を使用される場合、血圧の高い方は、使用回数が極端に短くなる場合があります。必ずアルカリ乾電池をお使いください。(オキシライド乾電池も使用できます)
 - 乾電池は必ず1年に1回お取り換えください。
- 取り換えがおくれますと、漏液により故障するおそれがあります。

注意


- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池の+ - 極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

本体をACアダプターで使用する場合

注意

- ACアダプターは必ず専用品EW-2B01を使用する。(P5参照)
守らないと事故や感電・発火のおそれがあります。

- 1 ACアダプターのプラグを本体側面のコネクタにしっかり差し込む
- 2 ACアダプターをコンセントにしっかり差し込む

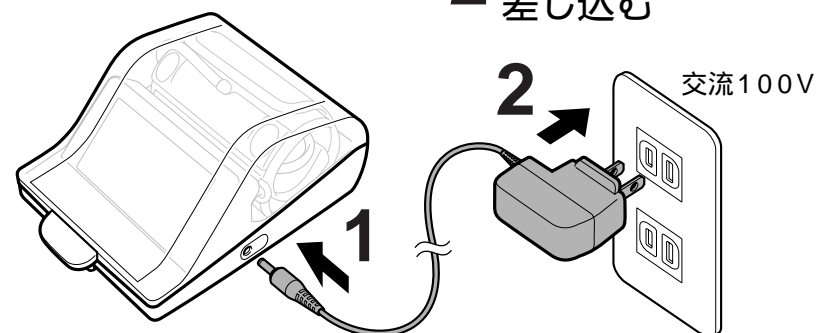


ACアダプターのみで使用される場合のご注意

乾電池を入れないで、ACアダプターをコンセントまたは本体から抜くと、設定した日付と時刻がリセットされて消えます。(記憶されたデータは残ります。)したがって、ACアダプターを使用される場合も、乾電池を入れて使用されることをお勧めします。

日付・時刻を設定する

ご購入後初めて測定されるとき、または乾電池を交換されたときは、日付・時刻を設定してください。

- 「ACアダプターのみで使用される場合のご注意」(P7参照)

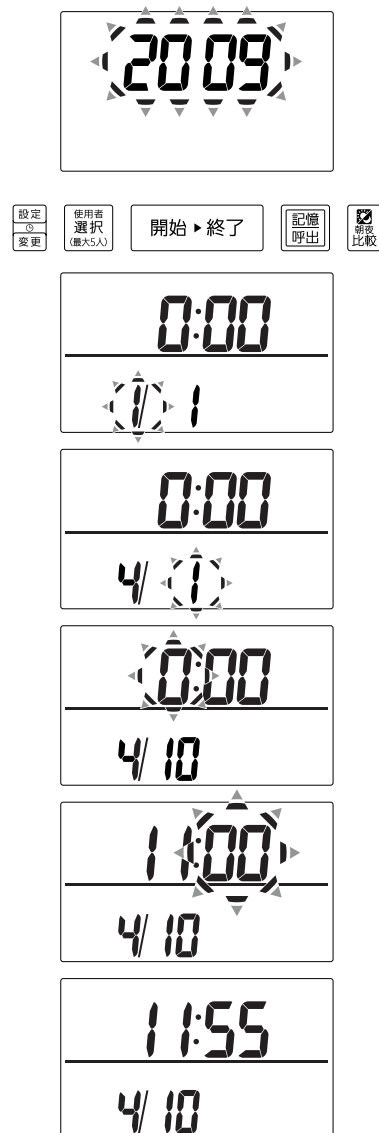

1 電池を入れる

または、電池を抜いた状態でACアダプターのプラグを本体側面のコネクタに差し込む
「年(2009)」が点滅する。

- 設定中に開始▶終了ボタンを押すもしくはボタンを押さずに30秒経過すると「2009年1月1日0:00」に自動的に設定されます。

2

変更ボタンを押し数字をあわせ、設定ボタンを押す

「年」を決定する

年の設定範囲は2009年から2040年です。2040年で変更ボタンを押すと2009年に戻ります。

「日付(1/1)と時刻(0:00)」が表示され「月(1)」が点滅する。

3

変更ボタンを押し数字をあわせ、設定ボタンを押す

「月」を決定する

「日(1)」が点滅する。

4

変更ボタンを押し数字をあわせ、設定ボタンを押す

「日」を決定する

「時(0)」が点滅する。

5

変更ボタンを押し数字をあわせ、設定ボタンを押す

「時」を決定する

「分(00)」が点滅する。

6


変更ボタンを押し数字をあわせ、設定ボタンを押す

「分」を決定し


設定を完了する

設定が完了すると画面に日付と時刻を表示し続けます。

日付と時刻の表示を消したい場合

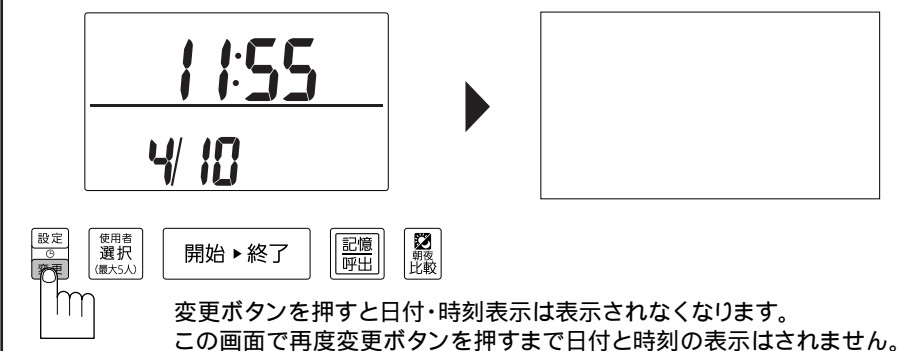


日付・時刻を設定しなおす場合

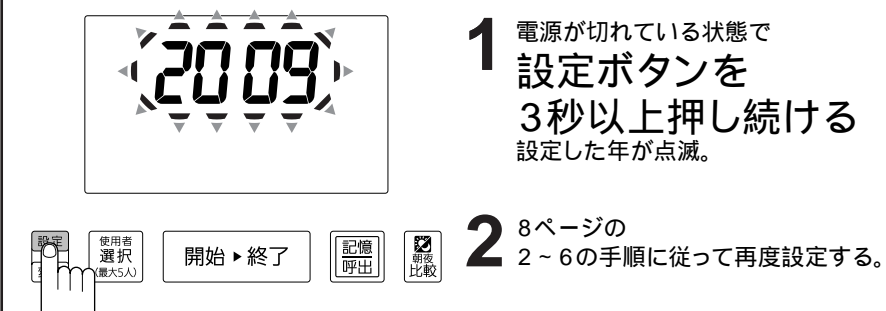



SDメモリーカードを準備する

SDメモリーカードの挿入・取り出しは、電源が切れている状態で行ってください。
測定中やデータの書き込み中に行うと記録されたデータが破壊される場合があります。
SDメモリーカードはPanasonic製のものを推奨します。
本商品はSDHCメモリーカードには対応しておりません。

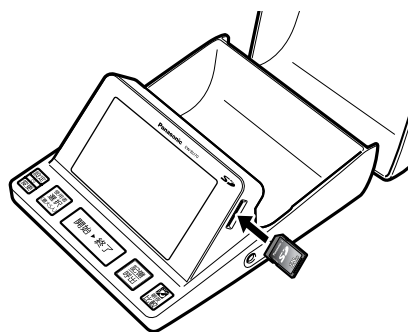



1 カバーを開く

- 2 SDメモリーカードの向きを確認して本体側面のSDメモリーカードスロットに挿入する。
ラベルが正面を向いて切り欠きが上側になるように挿入する。
表示部に「SD」マークが点灯。
「SD」マークはSDメモリーカードが挿入されている間、常に点灯。

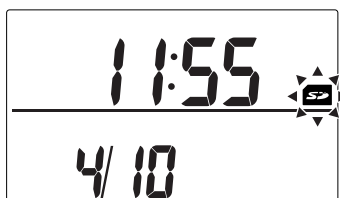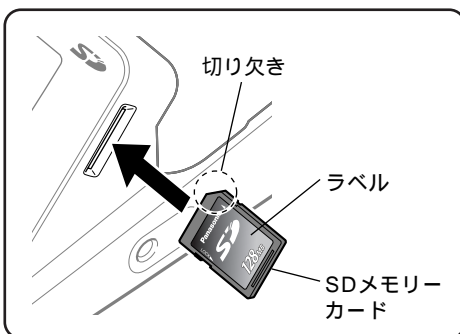

SDメモリーカードを取り出すとき

SDメモリーカードを「カチッ」と音がするまで押してから、飛び出しているカードを真っ直ぐ引き抜く。
表示部のSDマークが消灯。

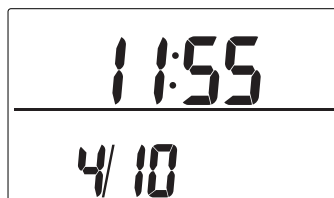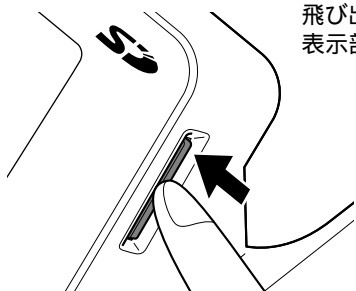

SDメモリーカードをお使いになる場合のご注意

- SDメモリーカードは精密機器のため、高温になるところや直射日光のあたる場所、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。
また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。
SDメモリーカードが破壊されたり、消失するおそれがありますので、大切な測定値データはパソコンなどにも保存しておくことをおすすめします。破損または消去したデータの損害については当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- SDメモリーカード裏面の端子部には触れないでください。
- 測定値の利用に際しましては、測定者のプライバシーを考慮し、ご利用されるお客様の責任において、管理及び取扱いを行ってください。
- SDメモリーカードには書き込み禁止機能が付いています。機能させておくと、SDメモリーカードへの書き込みや、データの消去及びフォーマットができなくなります。
- SDメモリーカードを誤った向きに挿入すると、血圧計だけでなく、SDメモリーカードも壊れる場合があります。必ずラベル面を正面にして正しい向きで挿入してください。
- SDメモリーカードを挿入した際には、SDメモリーカードの記録データのフォルダ構成などを確認する必要があります。確認中は液晶にSDマークが点滅します。
マークの点滅中は操作をしないでください。
- SDメモリーカードはデータの書き込み中などに取り出さないでください。
記録されたデータが破壊される場合があります。
- ご使用の環境によってはSDメモリーカードに記憶できる測定回数が異なりますのでご注意ください。
- 記録したデータをパソコン等で見ることをご希望の方には表計算ソフトにてCSVファイルを開くことをお勧めいたします。
パソコンおよびOSなどの環境によっては、動作しない場合があります。
- パソコンなどでSDメモリーカード内の画像データやフォルダなどを編集したりデータの名称を変更した場合、血圧計で正常に再生できなくなります。
(本情報は2009年3月時点のものであり、今後変更されることがあります。)

SDメモリーカードのフォルダ構成

SDメモリーカード	PRIVATE	PEWGROUP	BPM	n01 csv	SDメモリーカードに記憶された各使用者の測定値
				n02 csv	
				n03 csv	
				n04 csv	
				n05 csv	




データの中身

西暦	月	日	時	分	最高血圧	最低血圧	脈拍数	体動の有無	脈変動の有無	朝	夜	この内容は表示されません
2009	11	18	7	3	126	79	76	0	0	1	0	
2009	11	18	23	6	145	76	71	0	0	0	1	この内容が表示されます
2009	11	19	7	19	141	72	71	0	0	1	0	
2009	11	19	12	16	143	60	65	0	0	0	0	
2009	11	19	12	52	150	91	74	0	0	0	0	

カフを巻く




左腕に巻く場合

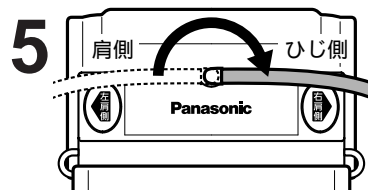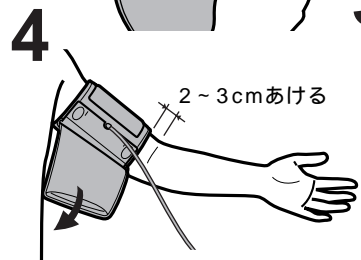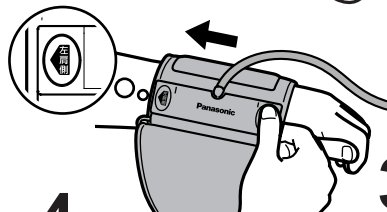

● 左右どちらの上腕でも巻いていただけます。

右腕に巻く場合

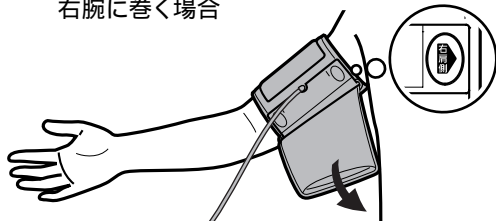

血圧は左右で10mmHg程度の差がでる場合があると言われておりますので、毎回同じ側の上腕で測定してください。

1 圧迫帯(カフ)を取る

2 圧迫帯(カフ)のプラグを圧迫帯(カフ)差込口に奥まで挿入する

3 圧迫帯(カフ)を腕に通す
●ガイドプレートのグリップに親指を当てて持つ。


4 ガイドプレートを手のひら側中指の延長線上に合わせて巻く
●素肌に巻く。
●ひじ関節部から2~3cm離す。
●隙間の無いように巻く。
その時、締めすぎにならないよう注意する。
●面ファスナーはしっかり押さえる。

5 チューブが肩方向に向かって出ている場合はひじ方向に出るようにチューブを回転させる

測定姿勢をとる

安静にリラックスした状態で測りましょう。

圧迫帯(カフ)が心臓の高さになるような机で測ってください。
高さが変わると血圧値が変わります。

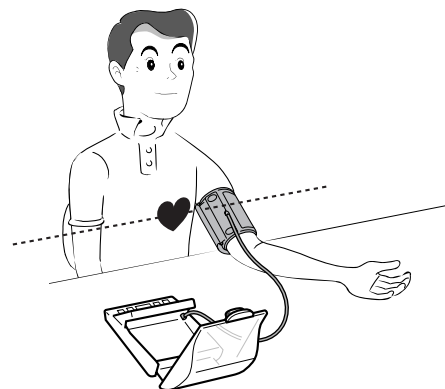

1 テーブル等にひじをつく

2 圧迫帯(カフ)と心臓の高さを合わせる

3 手のひらを上にして力を抜く

♥ 毎日同じ時刻に、同じ側の上腕と姿勢で測定しましょう。
おすすめは1日3回です。

1回目... 起床後(夜間の血圧に一番近く、体を動かした影響がほとんど加わらないため)

2回目... 昼食前(食事の影響がなく、1日のうちで一番高い血圧値に近いため)

3回目... 就寝前(1日の血圧値の平均値に近いデータが得られるため)

朝・昼・晩の測定で自分の血圧パターンを知って、
血圧管理にご活用ください。

次のような場合は、正しい血圧値が得られません

- 食後1時間以内やお酒を飲んだあと
- コーヒー、紅茶を飲んだり、喫煙した直後
- 動いている乗り物の中
- 運動や入浴の直後
- 寒い場所での測定 (室温は20℃くらいで測定してください。)
- 尿意があるとき (排尿後、数分待ってから測定してください。)
- (20分以上たってから安静状態で測定してください。)

測定中は、次のことを守ってください。

- 体や腕、指先は動かない。
 - 本体や圧迫帯(カフ)に触れない。
 - 話をしない。
 - 本体の近くで携帯電話を使用しない。
- 正確に測定できないことがあります。

測定の方法



1 開始 ▶ 終了ボタンを押す

- 表示部が全点灯後、圧迫帯(カフ)が自動的に加圧し測定します。
- 圧力値と「測定中」マークと時刻を表示。

- 減圧中に脈を検知するとハートマーク「♥」が点滅。

2 測定が終了すると終了音(ピッピッピッ)が鳴り、血圧値・脈拍数を表示


- 自動的に圧迫帯(カフ)の空気が抜けます。
- 測定値が高血圧領域の場合、数字が約5秒間点滅後点灯。(P20参照)
- 測定中に体動や脈間隔の変動があった場合は「体動」マーク、「脈間隔変動」マークが5秒間点滅後点灯。(P19参照)
- 「no.1」マークが点灯し、「記憶」マークが点滅。
- 脈拍数が測定できなかった場合、脈拍数のところに「E」マークを表示。

3 測定値を記憶する場合は16ページへ終了する場合は開始 ▶ 終了ボタンを押す

- 切り忘れても約2分間で自動的に電源が切れます。
- 日付と時刻の表示がONの場合日付と時刻を表示。表示を消したい場合はP9参照。

手動加圧での測定方法

毎回再加圧になり、適切な加圧ができない場合は、手動加圧で測定してください。

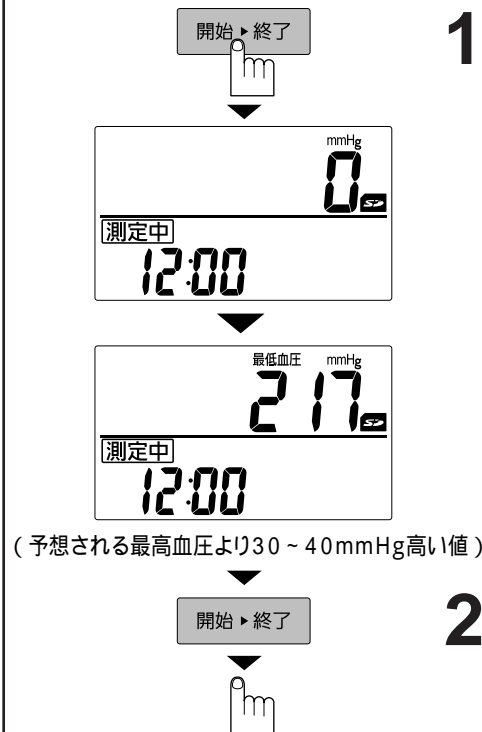

1 電源が切れている状態で予想される最高血圧より30～40mmHg高い値になるまで開始 ▶ 終了ボタンを押しつづける

- 開始 ▶ 終了ボタンを押している間、0mmHgから液晶の圧力の数字が上昇します。
- 最大280mmHgまで加圧できる。

⚠ 注意

必要以上に加圧すると腕に一時的に内出血が発生するおそれがあります。

2 開始 ▶ 終了ボタンを押すのをやめる

正しく測定できなかったとき

再測定マーク「U 12」が表示。

U 12



続けて測定するときは、開始 ▶ 終了ボタンを押して一度電源を切り、必ず4～5分間安静にした後、再度測定してください。

アドバイス

- 1回目よりも2回目の方が気負いがなく、冷静な状態にあることが多く、血圧も下がります。特に緊張しやすいタイプの人には、この2回ずつの測定が有効です。
- 2回以上測定の場合には、全ての値を記憶することをおすすめします。
- 2回目を測定する場合には、1回目のあと必ず4～5分間安静にしてから測定してください。

測定値を記憶する

この商品は測定値を最大540回記憶させることができます。
540回分の記憶を最大5人で分けて使うことができます。
(初期設定は2人です。使用者数を変更する場合はP.18を参照)
また付属のSDメモリーカード(128MB)には250万回分以上記録させることができます。

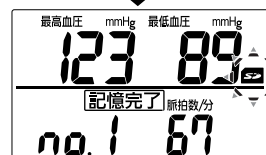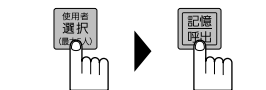

(約2秒後)



(約2秒後)



(約2秒後)



(約2秒後)


- 商品本体の記憶で540回以降の記憶の場合、記憶した使用者の最も古い測定値を消去して新しい測定値を記憶します。
- 正しく測定できなかったとき(血圧値の「U12」マーク表示)は記憶できません。
- 本体にすでに540回記憶されている場合、新しい使用者の測定値は本体には記憶できませんが、SDカードには記録されます。
(本体に測定値を記憶したい場合は他の使用者の記憶した測定値を消去してください。)

記憶した測定値を全て消去したいとき

- 1 使用者選択ボタンを押して消去したい使用者を選択します。
- 2 記憶呼出ボタンを押して、記憶している測定値を呼出します。
- 3 もう1度記憶呼出ボタンを測定値が消えるまで3秒以上長押しします。
消去が完了すると選択した使用者の「no.1(2、3、4、5)」マークと「00」が表示されます。
SDメモリーカードのデータを消したい場合はP.23参照。

記憶した測定値を呼び出す

記憶完了後、電源が切れている状態または日付・時刻が表示されている状態から呼出可能です。

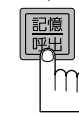


(約2秒後)



(約2秒後)



(約2秒後)

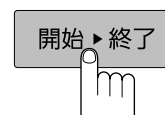

- 1 呼出したい使用者を選択するために
使用者選択ボタンを
押して使用者を選択する
使用者1「no.1」を選択する場合:何も押さない。
使用者1以外を選択する場合:
使用者選択ボタンを押す。

- 2 **記憶/呼出ボタン**を押す
 - 記憶している全ての測定値の平均値を表示。
 - SDメモリーカードが挿入されている場合
SDメモリーカードに記録されている測定値の
平均値が表示。(最大1095回分の平均値)
 - SDメモリーカードが挿入されていない場合
本体に記憶されているすべての測定値の
平均値が表示。
平均値を表示するまでしばらく時間が
かかる場合があります。その間、ボタンを
押しても動作が切り替わりません。
 - 表示部に「使用者ナンバー」と
「平均」マークを表示。
1回分のみ記憶されている場合は
「平均」マークは表示しません。

- 3 再度、**記憶/呼出ボタン**を
押すと
最も新しい測定値を表示
 - 記憶/呼出ボタンを押すごとに、
新しい測定値から順に表示されます。
本体の最も古い測定値の次は
SDメモリーカード内にその使用者の測定値がある
場合はSDメモリーカード内の新しい測定値から
順に表示されます。
 - 「記憶番号」、「測定日付」、「測定時刻」を
交互に表示します。
SDメモリーカード内の測定値を表示している
場合は約2秒間隔で、
「測定日付」、「測定時刻」を交互に表示。




- 4 終了するとき
開始・終了ボタンを押す
 - 切り忘れても約30秒で自動的に
電源が切れます。

記憶させる人数を変更する

この商品は測定値を最大5人分記憶させることができます。(初期設定は2人)
お使いの人数に合わせて設定してください。
使用者は1人から最大5人に設定可能です。



- 電源が切れている状態で
使用者選択ボタンを
3秒以上押し続ける
 ●使用者2「no.2」マークが点滅し
その使用者が記憶設定の状態(onかoff)が
表示。

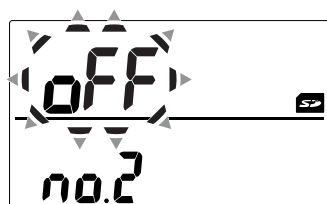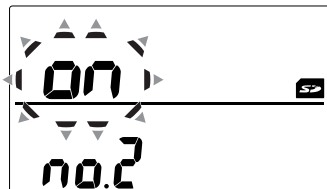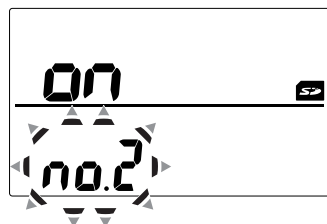

- 設定ボタンを押すと
選択した使用者の
記憶設定ができる
 ●その使用者が記憶可能かどうかの
状態(onかoff)が点滅。
●変更ボタンを押すと次の使用者へ変更される。

- 変更ボタンを押し
選択した使用者の
記憶設定を変更できる
 ●表示が「on」の場合「off」へ
「off」の場合「on」へ表示が変更し点滅。

- 設定ボタンを押し
選択した使用者の
記憶設定を完了する
 ●次の使用者記憶設定が表示。
●使用者5の記憶設定が完了すると
使用者2 3 4 5の記憶設定の内容が
2秒ごとに自動的に切り替わって表示。

- 設定を終了するとき
開始 ▶ 終了ボタンを押す
 ●途中で中止する場合も開始 ▶ 終了ボタンを
押す。

開始 ▶ 終了



各サインについて

「体動サイン」機能について

「体動サイン」は測定中腕などが動き、
圧迫帯(カフ)に余分な圧力がかか
ったときやボタンを操作した場合に「体
動サイン」マークでお知らせする機
能です。

- 体動を検知して測定終了した場
合は「体動サイン」マークは5秒間
点滅後点灯。
- 「体動サイン」マークが点灯した
場合は再測定してください。
- 測定中に圧迫帯(カフ)を装着し
た腕が動く(不意にひじを曲げる等)
と正しい測定値が得られないこと
があります。
- 体動を検知した測定値を記録し、
呼出を行った場合は「体動サイン」
マークが点灯。


「体動サイン」 マーク表示	説明
	体動を検知しました ●不意にひじが曲がった ●上腕に大きな力がかかった ●腕を動かした ●測定中にボタンを操作した など 測定終了後、正しい姿勢で再測定してくだ (P12参照)
	測定値が大きく異なるような動き ●体動が大きい ●体動が何回がある ●腕を大きく動かした など 再測定してください (表示部に再測定マーク「U 12」が表示)

この機能は、正しく測定いただく為の目安の機能です。
再測定表示(「体動サイン」マーク点灯)しなくても、
正しい測定のためには安静状態で2・3回の測定を
お勧めします。
(正しく測定するためにはP13参照)

「脈間隔変動サイン」機能について

「脈間隔変動サイン」は測定中の脈
の間隔が平均値から $\pm 2.5\%$ 以上差
のある脈を検知すると測定終了時に
「脈間隔変動サイン」マークでお知
らせる機能です。

- 「脈間隔変動サイン」マークは測
定終了時に約5秒間点滅後点灯。
- 「脈間隔変動サイン」マークが点
灯した場合は再測定してください。
- 測定中の脈の間隔が大きく変動
すると正しい測定値が得られない
ことがあります。
- 脈間隔変動を検知した測定値を
記録し、呼出を行った場合は「脈
間隔変動サイン」マークが点灯。

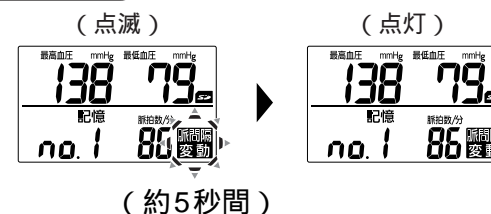

(約5秒間)

このマークは不整脈であることを
お知らせするものではありません。


この機能は、正しく測定いただくための目安の機能です。
再測定表示(「脈間隔変動サイン」マーク点灯)しなくて
も、正しい測定のためには安静状態で2・3回の測定をお
勧めします。(正しく測定するためにはP13参照)
マークが頻繁に表示される場合は、自身の健康状態につ
いて医師に相談してください。

測定結果の自己判断・治療はしないでください。
必ず医師の指導に従ってください。

各サインについて


「血圧サイン」のみかた

最高・最低血圧値それぞれに対して、高血圧領域か正常領域かをWHO/ISH(世界保健機関/国際高血圧学会)の血圧分類に基づき判別して、測定値の点滅でお知らせします。

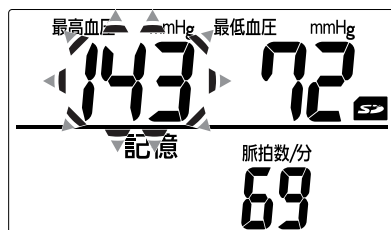

- 測定値が高血圧領域の場合、それぞれの数字が点滅。(約5秒間)


- 最高血圧 140mmHg以上
- 最低血圧 90mmHg以上 (測定終了時のみ)

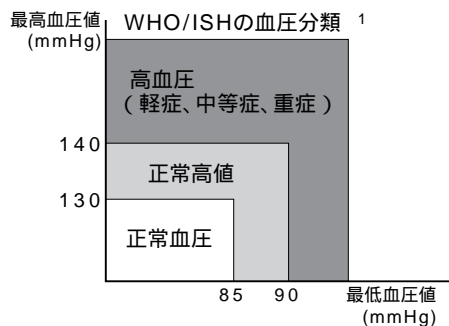

1 1999 World Health Organization-International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension

朝と夜の平均血圧の比較をする

朝と夜の測定値を比較することができるように朝と夜の平均血圧を同時に表示します。朝夜比較機能を使うことで早朝に血圧が急上昇する血圧パターンの早朝高血圧の発見に役立ちます。間違った日付・時刻を設定していると、正しく比較できません。記憶完了後、電源が切れている状態または日付・時刻が表示されている状態から呼出可能です。

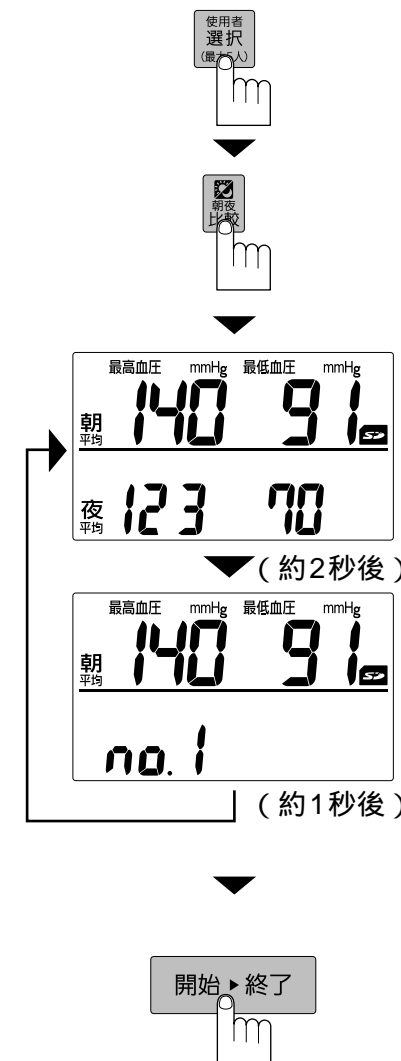

- 1 使用者選択ボタンを押して朝と夜の平均血圧の比較をしたい使用者を選択する
 - ボタンを押すたびに使用者が切り替わります。

- 2 朝夜比較ボタンを押す
 - 選択している使用者の朝の平均血圧と夜の平均血圧を同時に表示します。
 - SDメモリーカードが挿入されている場合SDメモリーカードに記録されている測定値の朝の平均血圧と夜の平均血圧を同時に表示します。(最大1095回分の測定値の中の朝の平均血圧と夜の平均血圧)
 - SDメモリーカードが挿入されていない場合本体に記憶されているすべての測定値の朝の平均血圧と夜の平均血圧を同時に表示します。

朝の定義	午前3時00分～午前11時00分
夜の定義	午後6時00分～午前2時59分

● 上記に記憶した血圧値の平均を表示します。
 ● 2回分以上記憶していない場合は測定値に「---」を表示します。


- 約2秒間朝と夜の平均値を表示後、約1秒間朝の平均と使用者ナンバーを交互に表示する。

- 3 終了するときは開始▶終了ボタンを押す

切り忘れても約30秒で自動的に電源が切れます。

血圧計の記憶をSDメモリーカードへ記録させる


血圧計の中に記憶した測定値を別の付属のSDメモリーカードに記録させたい場合に行います。
この時このSDメモリーカードに記録される測定値は、過去SDメモリーカードに記憶したことのある測定値のみが記録されます。
SDメモリーカードに書き込んでいない測定値を記録させる場合は、そのSDメモリーカードを本体へ挿入してから一度測定し、測定値を本体に記憶させるとSDメモリーカードにも記録されます。

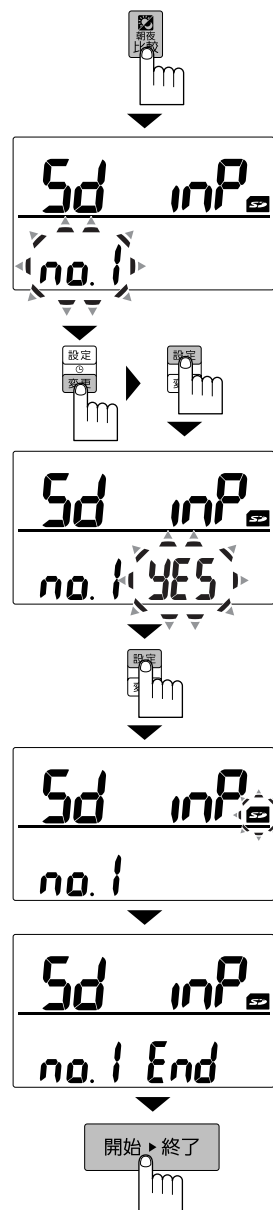

- 1 電源が切れている状態で
朝夜比較ボタンを
3秒以上押し続ける
表示部に「Sd inP」と点灯し、
使用者ナンバー「no. 1」が点滅
中止する場合は、開始 ▶ 終了ボタンを押す。
- 2 記録させたい使用者が異なる場合は
変更ボタンを押して
使用者を変更する
変更ボタンを押すごとに設定した
使用者ナンバー
「no. 2 (3、4、5) no. 1 no. 2」が表示。
- 3 設定ボタンを押す
「YES」が点滅。
中止する場合は、設定ボタン以外を
押してください。
- 4 設定ボタンを押すと
本体の記憶を
SDメモリーカードに
記録する
記録中は「SD」マークが点滅。
記録が完了すると「End」が点灯。
記録の途中でSDメモリーカードを抜かない。
記録に失敗した場合は「U51」と表示するので
再度記録を行ってください。
- 5 終了するときは
開始 ▶ 終了ボタンを押す
切り忘れても約10秒で自動的に
電源が切れます。

SDメモリーカードのフォーマット


付属のSDメモリーカード以外を使用する場合はフォーマットを行ってください。
フォーマットするとSDメモリーカード内のデータは全て削除されます。
大切なデータはパソコンなどにバックアップしておくことをおすすめします。

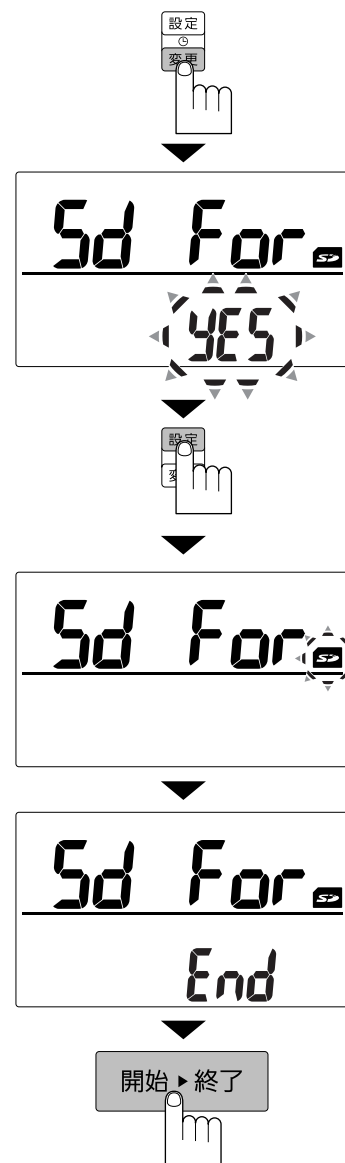

- 1 SDメモリーカードを
挿入する
- 2 電源が切れている状態で
変更ボタンを
3秒以上押し続ける
表示部に「Sd For」と点灯し、
「YES」マークが点滅。
中止する場合は、設定ボタン以外を
押してください。
- 3 設定ボタンを押すと
フォーマットを行う
フォーマット中は「SD」マークが点滅。
フォーマットが完了すると「End」が点灯。
フォーマットの途中でSDメモリーカードを
抜かないでください。
フォーマットに失敗した場合は
「U51」と表示するので
再度フォーマットを行ってください。
- 4 終了するときは
開始 ▶ 終了ボタンを押す
切り忘れても約10秒で自動的に
電源が切れます。

お知らせ音の時間を設定(確認)する

毎日同じ時刻に測定できるように、1日3回分のお知らせ時間を設定することができます。

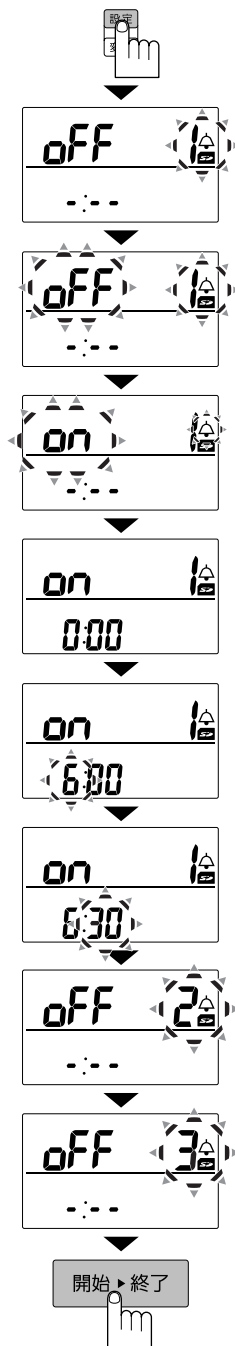

1 設定 ボタンを押す

- お知らせ時間1が点滅。
日付・時刻が設定されていないとお知らせ音の時間を設定できません。
(日付・時刻の設定はP.8参照)

2 もう一度設定 ボタンを押す

- 「△」と「off」表示が点滅。

3 変更 ボタンを押して、「on」を表示させる

- 「△」と「on」表示が点滅。
- 「on」 お知らせ音が鳴る状態。
- 「off」 お知らせ音が鳴らない状態。
- 「on」表示にして、設定ボタンを押すと、時刻が「0:00」になり、「△」と「on」が点灯します。

4 設定 ボタンを押して、時計の「時」を点滅させる 変更 ボタンを押して、数字を合わせる

5 設定 ボタンを押して、時計の「分」を点滅させる 変更 ボタンを押して、数字を合わせる

- お知らせ音の時間設定を終わる場合は、約30秒間ボタンを押さないでください。(表示が消えます)
- お知らせ時間2、3の時刻を設定する場合は、6、7の手順に従って設定する。

6 設定 ボタンを押すと、お知らせ時間2が点滅以後、2~5の手順でお知らせ時間を設定する

7 お知らせ時間2の設定が終了後、設定 ボタンを押すと、お知らせ時間3が点滅以後、2~5の手順でお知らせ時間を設定する

8 お知らせ時間3の設定が終了後、設定 ボタンを押すと、お知らせ時間1~3までの内容が、2秒ごとに自動的に切り替わって表示

9 設定を終了するときは、 開始▶終了ボタンを押す

- お知らせタイマーを設定すると表示部に「△」マークが点灯。
「△」マークはお知らせタイマーの設定をしている場合、常に点灯。

お知らせ時間を変更したい場合

- 本体にある設定ボタンを押す。(お知らせ時間1が点滅)
 - お知らせ時間2または3を変更する場合は、変更ボタンで2または3を表示させる。
- 設定ボタンを2回押して「時」を点滅させる。
- 変更ボタンを押して、数字を合わせる。
- 設定ボタンを押して、時計の「分」を点滅させる。 変更ボタンを押して、数字を合わせる。
- 開始▶終了ボタンを押して、設定完了。

お知らせ音を鳴らなくしたい場合

- 本体にある設定ボタンを押す。(お知らせ時間1が点滅)
 - お知らせ時間2または3を変更する場合は、変更ボタンで2または3を表示させる。
- 設定ボタンを1回押して「△」と「on」を点滅させる。
- 変更ボタンを押して、「off」を表示させる。
- 開始▶終了ボタンを押して、設定完了。


- 設定した時刻になると、お知らせ音が鳴り測定時刻をお知らせします。
- 測定中、設定した時刻になった場合、お知らせ音は鳴りません。
- お知らせ音は、どのボタンを押しても止まります。押さないと1分後に止まります。
- 戸棚の中や押入れの中に入れておくと、お知らせ音が聞こえないことがあります。
- 乾電池を交換されても、お知らせ時間の設定内容は保持されます。
(ただし、日付、時刻の再設定が必要です。)

アドバイス

記録表に、測定した値を記録するとき、同じ時間帯の値を並べると、毎日のご自分の血圧変化がわかりやすくなります。

使い終わったら

収納のしかた

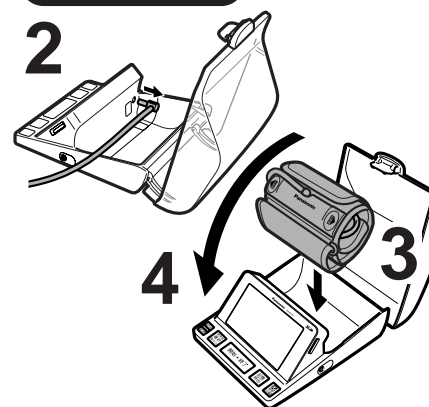

1 コンセントからACアダプターを抜く

2 本体からプラグを抜く

3 圧迫帯(カフ)を軽く巻いて、チューブを圧迫帯(カフ)の中に入れる

- チューブは本体などに巻きつけないでください。
チューブに無理な力が加わり、故障の原因となります。
- チューブの折れ曲がりに注意してください。

4 圧迫帯(カフ)を収納し カバーを閉める

定格・仕様

本体

定格・仕様

販 売 名	上腕血圧計 EW-BU70
定 格	DC6V(単3形アルカリ乾電池LR6×4本)
類 別	機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
一 般 的 名 称	自動電子血圧計(JMDNコード16173000)
医 療 機 器 の 種 類	管理医療機器
表 示 方 式	デジタル表示方式
測 定 方 法	オシロメトリック法
測 定 範 囲	圧力0~280mmHg 脈拍数40~180拍/分
精 度	圧力±3mmHg以内 脈拍数±5%以内
使 用 温 湿 度	10 ~ 40 30% ~ 85%RH
保 存 温 湿 度	-20 ~ 60 10% ~ 95%RH
測定可能な上腕周長	約20~34cm
本 体 寸 法	16.1×22.0×9.2cm
質 量	本体:約680g(乾電池除く) 圧迫帯(カフ):約170g
電 撃 保 護	内部電源機器BF形
医療機器認証番号	220AHBZX00022000
型 式 承 認 番 号	第Q094号
製 造 販 売 元	パナソニック電工株式会社 滋賀県彦根市岡町33番地
製 造 元	愛安德電子(深圳)有限公司 A&D ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD.

ACアダプター

入 力	AC100V 50-60Hz 10VA
出 力	DC6V 500mA
寸 法	全長5.4×全幅2.6×全高4.3cm
コ ー ド 長	1.5m
質 量	44g

定格表示記号の説明

⚠	取扱説明書をよく読んでご使用ください。
⤴	電撃保護 内部電源機器BF型(血圧計本体)
⏏	電撃保護 クラスⅡ機器(ACアダプター)
～	交流
≡	直流

Q & A

Q 病院で測った血圧値と、家庭で測った血圧値が違うのですが？

A. 血圧は24時間変動しています。
また、気候、感情、運動などにより、大きく変動する場合があります。
特に、病院では「白衣性高血圧」といい、緊張や不安から、
家庭での血圧値よりも高くなる場合があります。

また、家庭で測った血圧値が病院よりも高くなったり、
低くなったりする場合は、次のことが考えられますので、
下記に注意して測定してください。




圧迫帯(カフ)がしっかり巻けて
いますか。

- 圧迫帯(カフ)の巻き方がゆるすぎませんか。
または締めすぎていませんか。
- 圧迫帯(カフ)は上腕部に巻いていますか。
ひじにかかっていませんか。
正しい巻き方はP12を参照してください。



不安やイライラを感じていませんか。
測定前に、2・3回深呼吸すると
リラックスし、血圧が安定します。
また、4～5分間程度安静にしてからの
測定をお勧めします。

Q 測るたびに、測定値が違うのですが？

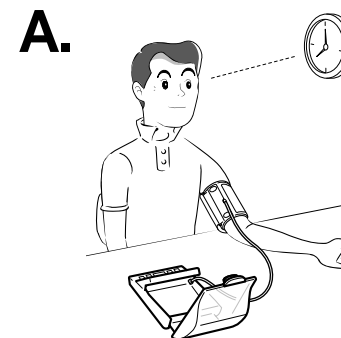

血圧は1日の中でも変化し、測定姿勢
などによっても違ってきますので、測
定するときは、いつも同じ条件で測定
してください。

降圧剤などを服用されている方は、薬
効により血圧値が大きく変動する場合
があります。

つづけて2回測定する場合には、必ず
1回測定後に4～5分間安静にしてから
測定してください。

Q 腕が動いたのに「体動サイン」マークがつかない

A. 「体動サイン」は測定中腕などが動き、圧迫帯(カフ)に余分な圧力がかかったときやボタンを操作した場合に「体動サイン」マークでお知らせする機能です。したがって圧迫帯(カフ)に影響のない動き(軽く腕を捻る、手首を曲げる等)はお知らせできないことがあります。気になる方は、再度測定してください。

Q 「体動サイン」マークがついたので腕を正しい位置に戻して測定したのにいつもより高い数値がでた

A. 「体動サイン」はあくまでも測定方法の目安です。「体動サイン」マークがついてから正しい姿勢にしたのに血圧が高いまたは低い場合は再測定してください。また次のような要因も考えられます。

- 正しく測定されていますか(圧迫帯(カフ)の巻き方、姿勢など)
P12～13を参照して測定してください。
- タバコを吸った直後に測った。
- イライラしたときに測った。
- 寒い環境で測った。
- 脈の変化が少ない体質の方。
- 気になる方は、4～5分間安静にしてから再度測定してください。

故障を防ぐために

無理な力を加えたり、落としたりしないでください。



● 故障の原因

氷点下で保管したときそのまま使用しないでください。暖かい所に1時間以上放置してからご使用ください。



● 加圧しない原因

圧迫帯(カフ)は、洗わないでください。



● 故障の原因

保管は、高温・多湿・直射日光をさける。



● 守らないと故障の原因

ホコリや異物を入れないでください。



● 故障の原因

器具の汚れは、ぬるま湯か石けん水を含ませた布でふいてください。(アルコールやベンジン、シンナーは使わない)



● 割れや変色の原因

こんな異常を感じたら

表 示	エラー前の現象	原因と処置	症 状	考えられる原因
U01 と表示される	動作の途中で表示が消える (あるいはマーク点灯)	乾電池が消耗している (P6参照)	開始・終了ボタンを押しても表示しない	乾電池の⊕⊖の向きがまちがっている (P6参照)
U12 と表示される	280mmHg以上加圧した (何度も加圧する)	正しい方法、姿勢で測定していますか? (P13参照)	測定中「脈動」マークが点滅する	測定中に大きな脈の変動があった (P19参照)
	急に圧力が下がった	● 圧迫帯(カフ)を正しく巻いていますか? ● 圧迫帯(カフ)のプラグを正しく挿入していますか? (P12参照)	測定中「体動」マークが点滅する	測定中、腕などが動いたときや、ボタンを操作したとき (P19参照)
	ハートマークが数回しか(または全く)点滅しなかった	● 圧迫帯(カフ)のプラグを正しく挿入していますか? (P12参照)	腕や体を動かしていないのに「体動」マークが点滅する	手に力を入れた場合も反応することがあります。力を抜いて測定してください。 (P19参照)
	加圧しない	● 圧迫帯(カフ)のプラグを正しく挿入していますか? (P12参照)	腕や体を動かしていないのに「体動」マークが点滅する	加圧中に測定するため、加圧の途中で、動作音や加圧の速さが変化したりしますが異常ではありません。
	腕や体を大きく動かし	体動を検知していませんか? (P18参照)	加圧中に音や加圧の速さが変わる	
F01 と表示される	本体の故障		破損してしまった	販売店に点検、修理を依頼してください
最高血圧値または最低血圧値が高い、または低い	● 測定時の心臓の高さに対して本体の位置が高い、又は低い ● 圧迫帯(カフ)に正しく腕を入れていない ● 測定中動いたり、しゃべったりした (P12参照)			
医師の測定と値が異なる	● 血圧は医師の前などでの微妙な心理状態の変化に反応して変化します ● 4～5分間ほどリラックスして再測定する (P27参照)			
測定ごとに値が異なる				
表 示	考えられる原因	原因と処置		
U50 と表示される	● SDメモリーカードがフォーマットされていない ● SDメモリーカードを認識できない	● SDメモリーカードをフォーマットしていますか? (P10.11参照)		
U51 と表示される	● SDメモリーカードに書込めない ● SDメモリーカードに書込めるだけの容量がない	● SDメモリーカードが壊れていませんか? ● SDメモリーカードは推奨のものをご使用されていますか? (P10.11参照)		
U52 と表示される	● SDメモリーカードの中身を読み出せない	● SDメモリーカードが書き込み禁止になっていませんか? (P5参照)		
U53 と表示される	● SDメモリーカードを書込み中、読み込み中に抜いた	● SDメモリーカードの空き容量がなくなっていないですか? (P10.11参照)		
		● SDメモリーカードが壊れていませんか? ● SDメモリーカードは推奨のものをご使用されていますか? (P10.11参照)		
		● SDメモリーカードの書き込み中、読み込み中に抜かないでください。 (P10.11参照)		

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談センター」へ！
使い方・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様相談センター」へ！

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この上腕血圧計の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

29ページの「こんな異常を感じたら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電池、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので恐れいりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	上腕血圧計	お買い上げ日	年	月	日
品番	EW-BU70	故障の状況	できるだけ具体的に		

パナソニック電気お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  ハイ 365日
(全国共通番号) **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電気テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 ☎
名古屋 ☎052-551-7900 ☎
東京 ☎03-5392-7190 ☎
福岡 ☎092-622-0531 ☎

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話  フリーダイヤル **0120-878-365** パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX  フリーダイヤル **0120-878-236**

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電気株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

便利メモ(おぼえのため、記入 されると便利です)	お買い上げ日	年	月	日	品番	EW-BU70
	販売店名				電話()	-

パナソニック株式会社

パナソニック電気株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009

パナソニックホームページ <http://panasonic.jp>

2009年1月15日作成(新様式第1版)

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内で次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

愛情点検

長年ご使用の上腕血圧計の点検を!



こんな症状はありませんか?

電源コードを動かしたときに電気が入ったり、切れたりしませんか。
本体・電源プラグ・電源コードがさわれないほど熱くなっていますか。
電源コードにキズはありませんか。
異常なおい(焦げるような)や音が出ていませんか。
触ると電気(ビリビリ)を感じることはありませんか。

ご使用中

このような症状のときは、事故防止のため、主電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。